


Stare sito - czyszczenie

1. Weź sito do czyszczenia i zerwij z niego taśmę




2. Nałóż fartuch ochronny, rękawiczki i w razie potrzeby okulary.

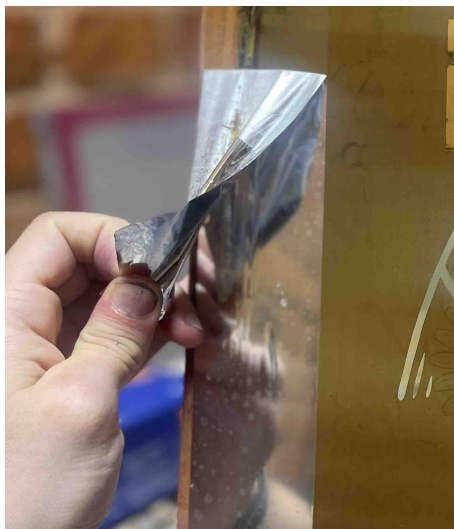


3. Weź zużyte sito i umieść je w komorze do czyszczenia.



4. Włącz dopływ wody do myki ciśnieniowej (po lewej stronie przy ścianie). Spryskaj sito po 10 sekundach.

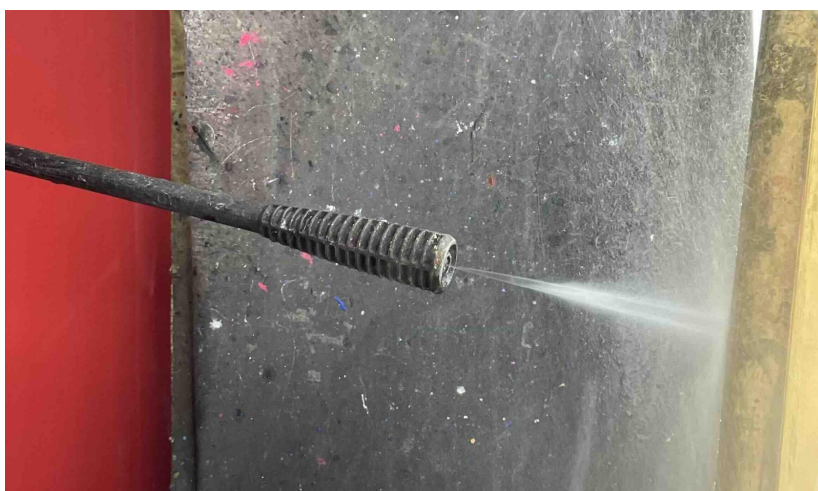

5. Weź z półki pastę do czyszczenia Pregasol. W miarę możliwości ekonomicznie nałóż za pastę na obie strony ciał. Pozostaw na ok. 5 minut, żeby

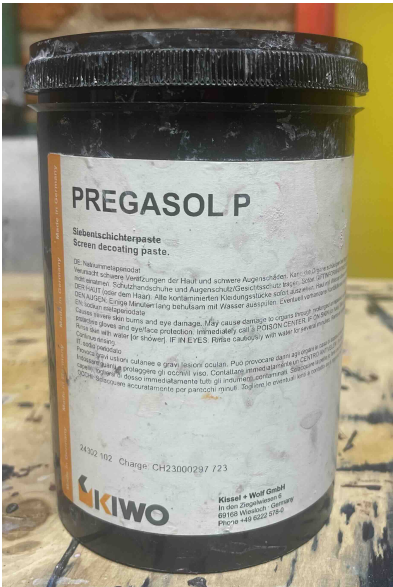

6. Włącz podświetlenie myjki, włącz Karchera i dokładnie odwarstw sito. Strumień wody musi być dosyć blisko siatki, uważaj jednak aby jej nie uszkodzić. Strumień powinien być skierowany na prawą stronę sita.



7. Wyczyszczone sito pozostaw do schnięcia na górnej półce w komorze do czyszczenia.



Wersja #4

Utworzono 2025-02-11 12:01:42 UTC przez Nadia Daria Dobrowolska-Muszyńska

Zaktualizowano 2025-09-18 15:17:14 UTC przez Maciej Rotowski